

VISAGE STUDIO

ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE
PENTRU STANDARDE ÎNALTE

AI SculptIQ

stimulare musculară electromagnetică cu analiză corporală AI

Tehnologie HIFEM de mare intensitate, 4 aplicatoare și analizator corporal cu 8 electrozi: aparatul scanează compoziția corporală, recomandă automat parametrii și sculptează musculatura în timp ce reduce grăsimea — neinvaziv, fără timp de recuperare.



**TONIFIERE ȘI ARDERE DE GRĂSIMI.
O SINGURĂ ȘEDINȚĂ DE 30 DE
MINUTE.**

7T

Intensitate magnetică
până la 7 Tesla

4

Aplicatoare
2 plate + 2 curbate

58

Indicatori corporali
analizați de AI

20K

Contracții musculare
în 30 de minute

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/aparat-stimulare-musculara-electromagnetica-ai-sculptiq-cu-4-capete-si-analizator-corporal-ai



Scanează pentru produs

■ PREZENTARE

Tonifiere și ardere de grăsimi, ghidate de inteligența artificială

AI SculptIQ combină energia electromagnetică focalizată de mare intensitate (HIFEM) cu un analizator de compoziție corporală și un software Android cu AI. Fiecare client primește un plan de tratament construit pe datele propriului corp, nu pe presupuneri.

01

Tehnologia HIFEM

Câmpul electromagnetic trece prin piele și țesutul adipos și stimulează direct neuronii motori, provocând contracții supramaximale imposibil de obținut prin efort voluntar.

02

Analiză corporală AI

Analizatorul cu 8 electrozi, conectat prin Bluetooth, măsoară 58 de indicatori, iar software-ul generează automat intensitatea, frecvența și durata tratamentului.

03

Android & cloud

Date salvate în cloud, rapoarte imprimabile pentru client, actualizări software continue și control de la distanță, inclusiv pentru modelul de închiriere.

+20–25%

masă musculară (medie clinică)

–25–30%

grăsime subcutanată (medie clinică)

90%

fibre musculare activate

30 min

durata unei ședințe pe zonă

Zone de tratament

Abdomen · Fese (mușchii fesieri) · Coapse · Femurali · Brațe · Gambe

Sculptare musculară

- Contracții supramaximale de înaltă frecvență care forțează adaptarea profundă a musculaturii
- Stimularea hiperplaziei fibrelor musculare și creșterea masei musculare
- Tonifierea abdomenului, lifting și fermitate pentru fese, coapse și gambe
- Întărirea și tonifierea mușchilor brațelor

Reducerea grăsimii

- Necesarul imens de energie declanșează lipoliza — descompunerea trigliceridelor
- Stresul metabolic intens duce la apoptoza naturală a celulelor adipoză
- Celulele distruse sunt eliminate de organism în câteva săptămâni
- Contur mai definit, fără durere și fără timp de recuperare

■ UTILIZARE

Moduri de lucru și protocol de tratament

Aparatul pornește direct în interfața de selectare a modului și a limbii. Operatorul poate lucra complet manual sau poate lăsa AI-ul să construiască tratamentul pe baza analizei corporale.

M

Mod manual

Sex, vârstă, înălțime și zonele tratate; intensitate independentă pentru mânerle A, B, C, D (0–100), frecvențe F1–F3 (3–200 Hz) și durată 1–60 min.

P

Programe presetate

5 moduri gata de folosit: HIIT, Hipertrofie, Ardere grăsimi, Modelare și Slăbire — de la începători la sportivi de performanță.

AI

Mod AI

Clientul urcă pe analizator, iar raportul „Analiza grăsimii” și „Analiza musculară” generează automat parametrii recomandați.


Pași de utilizare

- Consultație, verificarea contraindicațiilor și fotografii inițiale
- Scanarea compoziției corporale cu analizatorul (descult, palme și tălpi ușor umede)
- Clientul se așază pe spate (abdomen) sau pe burtă (fese); aplicatoarele se fixează cu curelele
- Se pornește de la intensitate redusă și se crește treptat, după toleranța clientului
- La final, aparatul se oprește automat; se notează parametrii și se arhivează fotografiile

Protocol recomandat

- Cură completă: 4 ședințe pe zona de tratament
- Interval: 2–3 zile (48–72 ore), 4 ședințe în 2 săptămâni
- Durată: 30 de minute pe zonă; abdomenul poate fi tratat cu două aplicatoare simultan
- Rezultate maxime la 3 luni; fotografii comparative la 2 săptămâni, 1 și 3 luni
- Întreținere: o ședință de rapel la 3–6 luni

Analiză completă: 5 dimensiuni esențiale

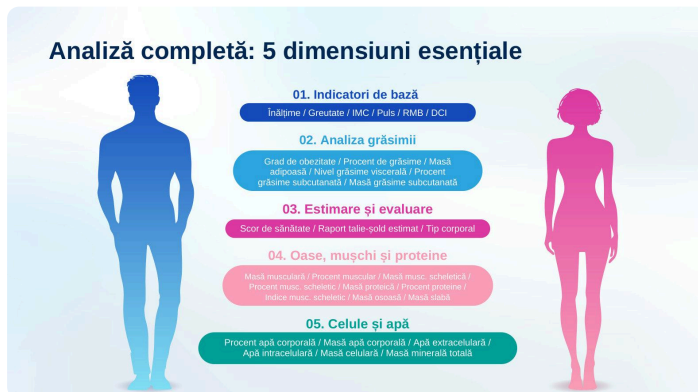

Analiză completă în 5 dimensiuni: indicatori de bază, grăsime, evaluare, oase-mușchi-proteine, celule și apă

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Tehnologie	HIFEM / EMS — stimulare musculară electromagnetică de mare intensitate
Sistem	AI Android, ecran tactil, cloud
Tensiune de alimentare	AC 110V–230V; 50–60 Hz
Putere de ieșire	5000 W
Frecvență	1–200 Hz (programe F1–F3)
Intensitate magnetică	7 Tesla
Aplicatoare	4 (2 plate + 2 curbate), intensitate reglabilă independent 0–100
Durata ședinței	1–60 min (recomandat 30 min / zonă)
Analizator corporal	8 electrozi, Bluetooth, 58 de indicatori
Moduri de lucru	Manual, 5 programe presetate, AI
Limbi interfață	peste 20, actualizate continuu
Greutate brută	80 kg
Dimensiuni ambalaj	62 × 65 × 132 cm



Unitatea principală și analizatorul de compoziție corporală

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 luni pentru persoane juridice
- Service propriu în România, 5 ani post-garanție
- Training gratuit și suport tehnic
- Manual în limba română, declarație și certificat de conformitate
- Finanțare în rate, suport Start-Up Nation

Contraindicații

- Stimulator cardiac, implanturi metalice sau orice metal în corp
- Afecțiuni cardiace (inclusiv aritmii), cancer, boli infecțioase
- Sarcină, alăptare, perioada menstruației
- Diabet, intervenții chirurgicale majore recente
- Boli cerebrovasculare, epilepsie, hernii ale peretelui abdominal
- Răni sau leziuni ale pielii în zona tratată; minori

Efecte normale după tratament

- Febră musculară 1–2 zile, similară unui antrenament intens
- Ușoară roșeață locală și senzație de căldură, temporare
- Fără timp de recuperare — activitățile se reiau imediat
- Recomandat: hidratare bună și aport echilibrat de proteine

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială disponibilă.