

VISAGE STUDIO
ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

LipoSculpt Liposonix + Hifu

**Aparat Profesional 2 în 1 pentru
Topirea Grăsimilor, Slăbire și Celulită**

Aparat care îmbină tehnologiile HIFU și Liposonix pentru remodelare corporală și rejuvenarea pielii: ultrasunete focalizate precis, pentru reducerea grăsimii fără disconfort sau perioadă de recuperare.



SLĂBIRE. REMODELARE. LIFTING.

HIFU + LIPOSONIX, 600 W.

576

puncte
focus Liposonix

1-8

J/cm²
energie Liposonix

1-3

J
energie HIFU

600

W
putere

ACCESSORIES

3 Ultrasonic Knife Probes



2 Slimming Probes



Scanează pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/aparat-profesional-liposonix-si-hifu-2-in-1-pentru-topirea-grasimilor-slabire-celulita-liposculpt

PREZENTARE

Puncte de coagulare termică în stratul țintă

HIFU concentrează energia ultrasonică în mici puncte de coagulare termică: pe față stimulează producția de colagen, iar pe corp distruge celulele adipoză. Liposonix este aplicația HIFU dedicată conturării corporale: vizează grăsimea subcutanată la aproximativ 1-2 cm, iar celulele adipoză distruse sunt eliminate natural, prin procesele metabolice.

1 Liposonix Reducerea grăsimii localizate: abdomen, talie, coapse, brațe.	2 HIFU Lifting facial, reducerea ridurilor, textura și fermitatea pielii.	3 Non-invaziv Fără incizii, anestezie sau perioadă de recuperare.
--	--	--

Procedură de 30-60 de minute

După tratament poate apărea o ușoară roșeață sau umflare, care dispare în câteva ore. Rezultatele apar după câteva săptămâni și se îmbunătățesc timp de câteva luni.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași


1 Evaluare Se măsoară zona și se stabilesc obiectivele.	2 Pregătire Pielea se curăță, zona se marchează, se aplică gel.	3 Setare Se alege funcția, cartușul și energia.	4 Tratament Se lucrează uniform, pe toată zona marcată.
--	--	--	--

Tratamentul este personalizabil în funcție de nevoile fiecărui client și de zona tratată.

CARTUȘE ȘI PARAMETRI

Două tehnologii într-un singur aparat

HIFU	Liposonix	Aplicații
• Cartușe 1,5 / 3,0 / 4,5 mm • Energie 1-3 J • Frecvență 4-7 MHz • 20.000 impulsuri/cartuș față • 30.000 impulsuri/cartuș corp	• Cartușe 0,8 / 1,3 • Energie 1-8 J/cm², ajustabilă • 576 puncte de focus • 525 impulsuri/cartuș	• Grăsimi abdominală • Conturarea taliei • Coapse și brațe • Lifting facial, riduri

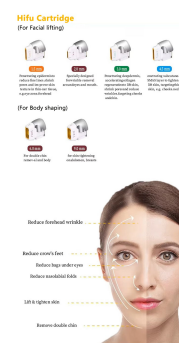

Frecvența Liposonix este de 230 kHz $\pm$ 20 kHz. Procedura nu afectează țesuturile înconjurătoare și este bine tolerată.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	Aparat Profesional Liposonix și Hifu 2 în 1 LipoSculpt
Cartușe HIFU	1,5 / 3,0 / 4,5 mm
Impulsuri HIFU	20.000 cartuș față / 30.000 cartuș corp
Energie HIFU	1 - 3 J
Frecvență HIFU	4 - 7 MHz
Cartușe Liposonix	0,8 / 1,3
Energie Liposonix	1 - 8 J/cm² (ajustabilă)
Frecvență Liposonix	230 kHz ± 20 kHz
Puncte de focus Liposonix	576
Impulsuri per cartuș Liposonix	525
Putere	600 W
Alimentare	110 - 240 V, 50/60 Hz



LipoSculpt — Liposonix + Hifu 2 în 1

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni pentru persoane juridice
- Service și piese de schimb 5 ani post-garanție
- Manual tehnic în limba română
- Declarație și certificat de conformitate

Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament destinat exclusiv utilizării profesionale, de către personal instruit. Capul de lucru se ține ferm, perpendicular pe piele, cu gel de ultrasunete.

Nu se tratează direct globul ocular, glanda tiroidă, zonele cu nervi superficiali sau zonele cu implanturi. Energia se adaptează toleranței clientului.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările după procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului, conform manualului de utilizare.

Înainte de tratament

- Pielea se curăță de machiaj și impurități.
- Zona de tratat se marchează.
- Se aplică un strat uniform de gel de ultrasunete.
- Se alege cartușul potrivit zonei.

După tratament

- Roșeața ușoară dispare în scurt timp.
- 3 zile fără apă fierbinte, saună sau baie caldă.
- Hidratare și protecție solară.
- Efectul de lifting se accentuează în săptămâni.

Întreținere

- Cartușele se curăță după fiecare utilizare.
- Se urmărește numărul de impulsuri rămase.
- Aparatul se păstrează uscat, fără praf.
- Capul de lucru nu se lovește și nu se scapă.

Utilizare

- Energia se crește treptat, de la valori mici.
- În mai multe straturi: de la adânc la superficial.
- Liniile se trasează uniform, fără suprapuneri.
- Tratamentele se notează în fișa clientului.

Funcții și interfață

Selectarea funcției HIFU sau Liposonix, a cartușului și a energiei, cu afișarea impulsurilor rămase.

IMPORTANT

Aparatul nu se utilizează la femei însărcinate sau care alăptează, la persoane cu stimulator cardiac ori implanturi metalice în zona tratată, pe zone cu răni, inflamații sau infecții active, direct pe globul ocular sau pe glanda tiroidă și la persoane cu afecțiuni severe ale pielii.