

VISAGE STUDIO

ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE
PENTRU STANDARDE ÎNALTE

Criolipoliză 360° cu 5 capete ajustabile

Răcire pe 360° cu cinci aplicatoare de dimensiuni diferite, plus cavitație 40 kHz, radiofrecvență corporală și facială și lipolaser — o platformă completă de remodelare corporală.



RĂCIRE PE 360°.

JUMĂTATE DIN TIMPUL DE LUCRU.

5

capete de
criolipoliză

360°

răcire pe
toată aria

-10/+45°C

interval de
temperatură

800w

putere
aparat



Scanează
pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/aparat-criolipoliza-360cu-5-capete-ajustabile-cavitate-radiofrecventa-si-lipolaser-pentru-slabire-anticelulita-tonifiere-si-lifting

■ PREZENTARE

Răcire pe toată circumferința zonei

Celulele bogate în lipide pot fi afectate selectiv prin răcirea țesutului subcutanat sub 10 °C: acizii grași saturați cristalizează local, cristalele rup membrana celulelor adipoase și determină necroza selectivă a acestora — fără a afecta celulele dermice, care nu cristalizează la aceste temperaturi.

01

Aplicator circular

Aplicatoarele înconjoară zona pe 360°, astfel încât întreaga suprafață prinsă în cupă este răcită uniform.

02

Răcire și încălzire

Intervalul de lucru merge de la -10 °C la +45 °C, cu 4 moduri ciclice de alternanță a temperaturii.

03

Ședințe mai scurte

35 - 45 de minute pe ședință în loc de 60, ceea ce înseamnă aproape jumătate din timpul obișnuit de lucru.

Patru sisteme într-o singură platformă

Criolipoliză 360° · Cavitație 40 kHz · Radiofrecvență corporală și facială · Lipolaser cu 8 paduri

Efecte principale

- Reducerea depozitelor adipoase de pe talie, abdomen, picioare, brațe și spate
- Ameliorarea aspectului de celulită
- Fermitatea țesutului și prevenirea laxității cutanate
- Stimularea metabolismului și a circulației sanguine

Siguranță în funcționare

- Sistem propriu de alimentare pentru fiecare modul, cu funcționare stabilă
- Recunoaștere automată a accesoriului conectat, cu alarmă la conectarea greșită
- Capul de răcire din silicon moale, pentru confort la contact
- Circulație automată a apei un minut după pornirea sau oprirea răcirii
- Răcire cu protecție antiîngheț și termostatare automată
- Oprire automată la circulație anormală a apei



Aplicator cu cupă detașabilă



Cupe interschimbabile



Împărțirea zonei tratate

APLICATOARE

Cinci capete pentru fiecare tip de zonă

Aplicator	Dimensiuni suprafață de răcire	Recomandat pentru
Cap mare #1	195 × 85 mm	Zone verticale întinse de grăsime
Cap mare #2	210 × 90 mm	Se potrivește cel mai bine pe conturul abdomenului
Cap mare #3	215 × 100 mm	Flancuri — cupa curbată se așază pe zone curbate sau înguste
Cap mare #4	230 × 105 mm	Flancuri și suprafețe mari
Cap mic #1	140 × 70 mm	Zone verticale mai lungi: abdomen, flancuri, brațe
Cap mic #2	155 × 80 mm	Zone medii
Cap mic #3	165 × 90 mm	Zone medii
Mini cap #5	80 × 40 mm	Zone mici și greu accesibile

CUM SE LUCREAZĂ CU DOUĂ CAPETE

Capetele 1 și 2 pot funcționa simultan, la fel și capetele 3 și 4. La conectarea unui cap se aude un semnal sonor, care confirmă recunoașterea de către aparat; la două capete conectate se aud două semnale. Pentru a schimba un aplicator, opriți aparatul, conectați al doilea cap și reporniți — abia după recunoaștere se poate începe tratamentul.

Parametri de lucru

Parametru	Interval	Observații
Temperatură de răcire	-10 °C ... +45 °C	Se alege în funcție de zona și de toleranța clientului
Timp de aspirație	0,5 - 9 s	Reglabil din interfață
Timp de pauză	0 - 4 s	Se setează mai mare decât timpul de aspirație
Durata ședinței	1 - 60 minute	35 - 45 de minute pentru o ședință obișnuită
Presiune de vacuum	0 - 80 kPa	Reglabilă din robinetul de pe aparat



Aplicator mare



Aplicator mic



Cap cavitație 40 kHz




Paduri lipolaser

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Tehnologii	Criolipoliză 360°, cavitație 40 kHz, radiofrecvență corporală și facială, lipolaser
Alimentare	AC 220 V ±10 %, 50 Hz / AC 110 V ±10 %, 60 Hz
Putere nominală	800 W
Presiune negativă	0 - 80 kPa
Interval de răcire	-10 °C ... +45 °C
Capete de criolipoliză	5 bucăți, cu cupe interschimbabile
Frecvență cavitație	40 kHz
Frecvență radiofrecvență	5 MHz
Putere lipolaser	100 mW pe pad
Agent de răcire	apă distilată
Ecran	ecran tactil de 10,4 inch
Temperatură ambientală	5 °C - 40 °C, umiditate relativă ≤ 80 %
Dimensiuni aparat	62 × 46 × 170 cm
Dimensiuni ambalaj	110 × 81 × 65 cm · 71 kg brut

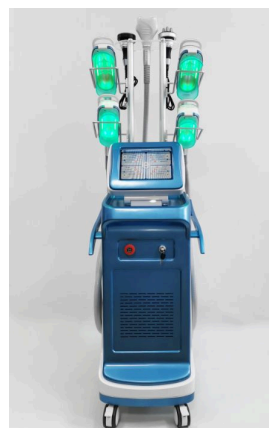

Unitate principală cu aplicatoarele montate

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 luni pentru persoane juridice
- Service propriu în România, 5 ani post-garanție
- Training gratuit și suport tehnic
- Manual în limba română, declarație și certificat de conformitate
- Finanțare în rate și opțiuni de plată pentru firme

Conținutul pachetului

- Unitate principală și cablu de alimentare
- Set de capete de criolipoliză cu cupe interschimbabile
- 1 cap de cavitație 40 kHz
- 1 cap de radiofrecvență corporală și 1 cap de radiofrecvență facială
- 8 paduri lipolaser și set de benzi de fixare
- Suport pentru accesorii și manual de utilizare

Siguranță și utilizare responsabilă

Aparatul este destinat exclusiv utilizării profesionale și nu este un dispozitiv medical. Circuitul de apă se verifică înainte de fiecare ședință: la circulație anormală aparatul se oprește automat. Aplicatorul se conectează și se schimbă numai cu aparatul oprit. Rezultatele sunt orientative și depind de vârstă, alimentație și nivel de activitate fizică.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială disponibilă.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Interfața de lucru și contraindicații




Ecran principal



Cavitație



Radiofrecvență corporală

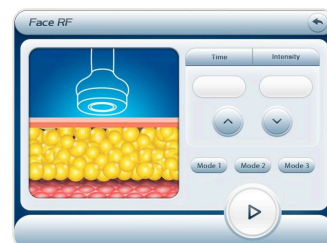

Radiofrecvență facială

Punerea în funcțiune

- Umpleți rezervorul cu apă purificată până când apa iese prin orificiul de preaplin, apoi scoateți furtunul și pâlnia.
- Conectați aplicatorul și așteptați semnalul sonor de recunoaștere.
- Reglați vacuumul din robinetul de pe aparat: spre stânga scade, spre dreapta crește.
- Setati temperatura, timpul de aspirație, timpul de pauză și durata ședinței.
- Goliți recipientul colector când lichidul depășește jumătate din volum.

Contraindicații

- Stimulator cardiac sau alte dispozitive medicale implantate
- Proteze osoase artificiale sau silicoză
- Consum de alcool sau febră ridicată
- Afecțiuni psihice severe și epilepsie
- Persoane fără discernământ sau fără capacitate de autoîngrijire
- Hipertensiune severă, boli cardiovasculare și cerebrovasculare
- Sarcină, tumori maligne, implanturi metalice (inclusiv dentare)
- Disfuncții ale sistemului imunitar și insuficiență renală
- Infecții severe

Se lucrează sub supravegherea unui specialist

Femei aflate la menstruație · copii · persoane cu pielea traumatizată sau infectată pe zona de tratat · persoane cu disfuncții ale sistemului imunitar · zone unde s-au efectuat intervenții estetice sau unde există umpluturi artificiale.



Cap radiofrecvență corporală



Cap radiofrecvență facială



Filtru de apă