

VISAGE STUDIO

ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE
PENTRU STANDARDE ÎNALTE

HIFU Liposonix slăbire și remodelare corporală

Ultrasunete focalizate de mare intensitate,
cu sonde faciale de 1,5, 3,0 și 4,5 mm pentru
lifting și sonde corporale de la 0,6 la 1,6 cm
pentru reducerea grăsimii localizate.



**LIFTING ȘI REMODELARE.
ÎNTR-UN SINGUR APARAT.**

3

sonde
faciale

5

sonde
corporale

4MHz

frecvență de
lucru

600w

putere
maximă



Scanează
pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/aparat-profesional-de-slabit-si-remodelare-corporala-hifu-liposonix

PREZENTARE

Aceeași tehnologie, două adâncimi de lucru

Ultrasunetele focalizate concentrează energia în puncte precise sub piele, unde se transformă în căldură. Pe față, focarele acționează asupra stratului SMAS și a collagenului; pe corp, asupra stratului adipos, unde temperatura de 65 - 70 °C distruge celulele grase.

Modulul facial · lifting

- **4,5 mm** — stratul fascial subcutanat (SMAS). Coagularea proteinelor produce o forță de tracțiune în jurul punctului de focalizare: efect de lifting și fermitate.
- **3,0 mm** — stratul de collagen. Stimulează reorganizarea collagenului, care tensionează pielea din interior și îi redă elasticitatea.
- **1,5 mm** — stratul superficial. Se adresează ridurilor fine și texturii.
- Zone: gât, bărbie dublă, linia mandibulei, obraz, frunte.

Modulul corporal · remodelare


- Sonde de **0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,6 cm**, alese după grosimea stratului adipos.
- Energia focalizată se transformă în căldură de 65 - 70 °C și distruge celulele adipoase.
- Grăsimea distrusă este eliminată prin metabolismul propriu al organismului.
- Collagenul se contractă și proliferază, umplând rapid spațiul rămas.
- Zone: talie, abdomen, spate, brațe, coapse, fese.

Cinci efecte într-un singur sistem

Lifting · Fermitate · Reducerea ridurilor · Reducerea grăsimii · Remodelarea conturului



Traseul de lucru pe față

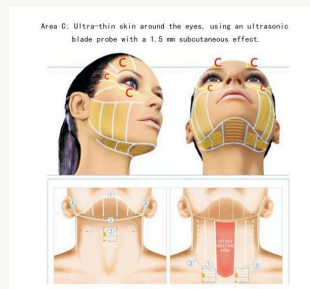

Zonele și direcțiile de aplicare

SONDE DE TRATAMENT

Ce sondă, pentru ce zonă

Sonde faciale

Sondă	Strat vizat	Zone recomandate	Energie
1,5 mm	Strat superficial	Gât, bărbie dublă, mandibulă, obraz, frunte	0,3 J
3,0 mm	Strat de collagen	Gât, bărbie dublă, mandibulă, obraz	0,3 J
4,5 mm	Strat fascial (SMAS)	Gât, bărbie dublă, mandibulă, obraz	0,3 J

Sonde corporale

Sondă	Adâncime de focalizare	Recomandat pentru
0,6 cm	Superficială	Strat adipos subțire
0,8 cm	Redusă	Brațe, zone cu strat adipos mic
1,0 cm	Medie	Zone intermediare
1,3 cm	Standard	Abdomen, flancuri, coapse
1,6 cm	Profundă	Strat adipos gros

REGULI DE LUCRU

Pe zonele mai superficiale, precum fruntea sau conturul ochilor, se lucrează cu energie mai mică. Energia se crește progresiv, de la valori mici către valori mari, în limita toleranței clientului. Nu se repetă mai mult de două treceri pe aceeași zonă, pentru a evita roșeața și edemul. Nu se lucrează niciodată fără gel de cuplare — se recomandă un gel cu vâscozitate suficientă, care împiedică reflexiile produse de golurile de aer.



Sondele de tratament



Sonde faciale: 1,5 · 3,0 · 4,5 mm



Mânerul de tratament

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Tehnologie	Ultrasunete focalizate de mare intensitate (HIFU), modul facial și modul corporal
Sonde faciale	1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm
Sonde corporale	0,6 cm, 0,8 cm, 1,0 cm, 1,3 cm, 1,6 cm
Frecvență de lucru	4 MHz
Putere maximă	600 W
Impulsuri pe cartuș	500
Puncte pe impuls	576
Adâncime de focalizare	până la 1,3 cm în țesutul subcutanat
Temperatură în focar	65 - 70 °C
Sistem de răcire	aer și apă
Moduri de lucru	rapid și lent, pentru ambele module
Lungimea liniei	reglabilă, pentru uniformizarea punctelor de energie
Alimentare	AC 110 V - 220 V
Siguranță fuzibilă	5 A
Dimensiuni ambalaj	43 × 39 × 33 cm
Greutate	cca. 10 kg



Pachet Visage Studio

- Garanție 24 luni pentru persoane juridice
- Service propriu în România, 5 ani post-garanție
- Training gratuit și suport tehnic
- Manual în limba română, declarație și certificat de conformitate
- Finanțare în rate și opțiuni de plată pentru firme

Contraindicații

- Sarcină și alăptare
- Tumori maligne, hemofilie sau sângerări severe
- Afecțiuni severe, boli de piele și boli infecțioase
- Leziuni sau infecții pe zona de tratat

Se utilizează cu prudență la diabet, hipertensiune, hipertiroidie, astm, afecțiuni cardiace și renale, la purtătorii de stimulator cardiac, defibrilator implantabil sau alte dispozitive medicale electromagnetice implantate.


Siguranță și utilizare responsabilă

Curățați pielea înainte de ședință și îndepărtați toate obiectele metalice de pe corp. Este interzisă operarea fără gel de cuplare. Gradul de încălzire a sondei nu reflectă puterea reală de ieșire a ultrasunetelor. Aparatul se utilizează exclusiv de personal instruit, conform manualului de utilizare.


Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială disponibilă.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Interfața de lucru și întreținerea

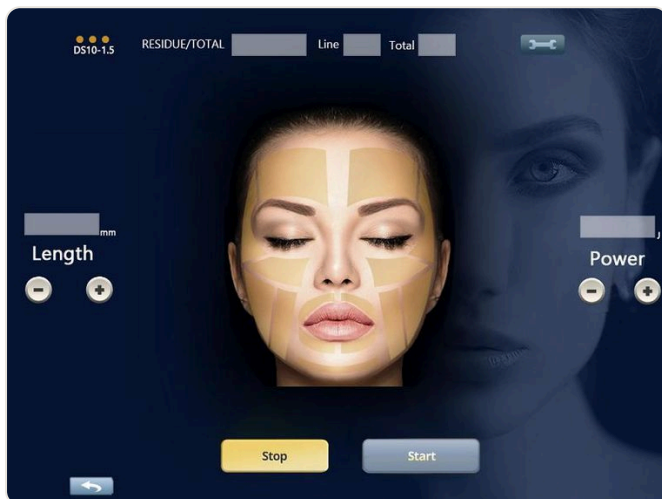

Selectarea zonei faciale

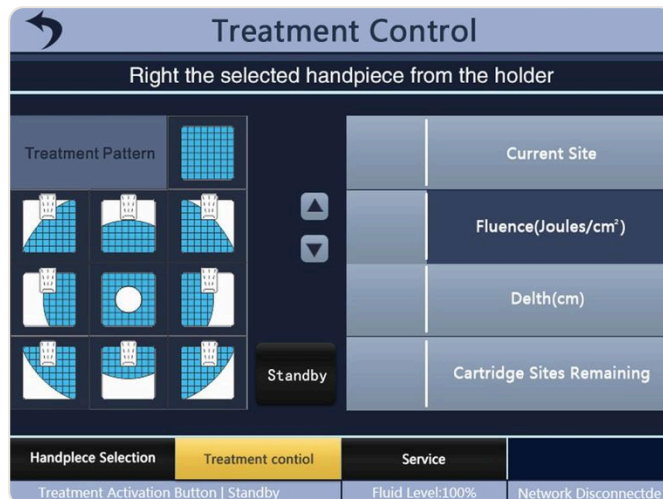

Controlul tratamentului

Pași de lucru

- Conectați aparatul la rețea și porniți-l din întrerupătorul principal.
- Alegeți modulul: facial sau corporal.
- Selectați sonda potrivită adâncimii zonei și montați-o pe mâner.
- Reglați energia din butoanele [-] și [+], pornind de la valori mici.
- Alegeți lungimea liniei și modul de lucru — rapid sau lent.
- Aplicați gel de cuplare și parcurgeți zona conform traseului marcat.
- Măsurați și înregistrați zona înainte și după ședință.

Întreținere

- După utilizare, ștergeți aparatul cu alcool sau ser fiziologic și depozitați-l corespunzător.
- Folosiți o priză cu împământare; verificați ca priza să fie efectiv legată la pământ.
- Dacă tensiunea din rețea este instabilă, folosiți un stabilizator de tensiune.
- Utilizați exclusiv accesoriile furnizate sau recomandate de producător.
- Nu amplasați aparatul în locuri umede, în apropierea unei surse de apă sau de căldură și nu îl expuneți direct la soare.
- Opriti întrerupătorul aparatului când nu este utilizat.