

## VISAGE STUDIO

ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE  
PENTRU STANDARDE ÎNALTE

# HIFace hydrfacial 14 funcții

Combină cosmetică profesională care reunește hidrodermabraziunea, dermabraziunea cu diamante, ultrasunetele, microcurenții, terapia fonică și oxigenoterapia într-o singură platformă cu ecran tactil.



**PATRUSPREZECE FUNCȚII.  
UN SINGUR APARAT.**

**14**

funcții  
integrate

**100kPa**

vacuum  
maxim

**10,4"**

ecran  
tactil

**250va**

putere  
maximă



Scanează  
pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

**VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO**

[visagestudio.ro/products/hydrfacial-aparat-hidrodermabraziune-hiface-pentru-rejuvenare-faciala-riduri-lifting-si-tonifiere](https://visagestudio.ro/products/hydrfacial-aparat-hidrodermabraziune-hiface-pentru-rejuvenare-faciala-riduri-lifting-si-tonifiere)

PREZENTARE

# Un protocol facial complet, de la curățare la fermitate

HIFace acoperă întregul traseu al unui tratament facial profesional: curățare profundă și exfoliere prin apă și oxigen, extracție, introducerea principiilor active, stimulare și, la final, calmarea și fixarea rezultatului.

## Curățare și exfoliere


- **Hidrodermabraziune** — exfoliere cu apă și oxigen, fără cristale abrazive; hidratare profundă și piele vizibil mai sănătoasă.
- **Dermabraziune cu diamante** — capete sterile care îndepărtează stratul superficial, cu aspirarea simultană a impurităților.
- **Skin scrubber** — vibrație ultrasonică de 28.000 de cicluri pe secundă, care emulsionează sebumul și resturile din pori.
- **Pen de vacuum** — extracția punctelor negre, cu aspirație intermitentă care masează și susține drenajul limfatic.
- **Bule mici** — curățare profundă cu oxigen activ.

## Tratament și fermitate

- **Microcurenți bio** — lifting neinvaziv, reducerea liniilor fine, circulație și penetrare mai bună a produselor.
- **Terapie fonică (PDT)** — lumină rece de energie joasă, care stimulează fibroblastele și producția de colagen.
- **Ultrasunete** — oscilație de 1 MHz, cu două capete: față și zona ochilor.
- **Înaltă frecvență** — efect antiseptic și de calmare, indicat pe tenul acnelor.
- **Dr.Pen (micro-needling)** — rejuvenare și absorbție crescută a produselor.
- **Pistol de oxigen și pen cu bule** — pulverizare de principii active cu oxigen.
- **Ciocan rece** — fixarea nutrienților și calmarea pielii la finalul ședinței.

## Ordinea recomandată a unei ședințe

Curățare · Exfoliere · Extracție · Introducerea activelor · Stimulare · Calmare și fixare

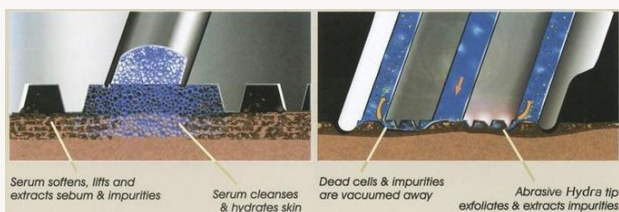

Vârfurile de hidrodermabraziune



Mâner de hidrodermabraziune

■ MÂNERE ȘI ACCESORII

# Fiecare funcție, cu mânerul ei



Hidrodermabraziune



Pistol de oxigen



Skin scrubber



Înaltă frecvență



Ciocan rece



Dr.Pen



Microcurenți bio



Ultrasunete

## Mânerle incluse

- Hidrodermabraziune cu 6 vârfuri
- Microcurenți bio — 1 buc.
- Pen de vacuum — 3 dimensiuni
- Terapie fonică — 2 mânerle
- Pistol de pulverizare — 1 buc.
- Înaltă frecvență — 1 buc.
- Ultrasunete — 2 buc. (față și ochi)

## Mânerle incluse (continuare)

- Dermabraziune cu diamante — 1 buc.
- Skin scrubber — 1 buc.
- Dr.Pen — 1 buc.
- Ciocan rece — 1 buc.
- Bule mici — 1 buc.
- Injecție — 1 buc.
- Cablu de alimentare, garnituri și consumabile de montaj

## Reguli de lucru

- Curățați bine zona de tratat înainte de fiecare ședință.
- Nu atingeți aparatul cu mâinile sau picioarele umede.
- Recipientul de colectare a lichidului se golește la timp: când se umple, sistemul se oprește automat, afișează mesajul pe ecran și emite un semnal sonor.
- Curățați paharul și tubul pistolului de oxigen după fiecare utilizare, pentru a evita înfundarea. Pistolul funcționează exclusiv cu produse lichide.
- Nu efectuați o nouă dermabraziune cu diamante mai devreme de 30 de minute, iar exfolierea sau rasil se reiau abia după trei zile.

FIȘĂ TEHNICĂ

# Parametri tehnici principali

|                                |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tehnologii integrate</b>    | Hidrodermabraziune, microcurenți bio, pen de vacuum, pistol de oxigen, terapie fonică, ultrasunete, dermabraziune cu diamante, înaltă frecvență, skin scrubber, ciocan rece, Dr.Pen, bule mici, injecție |
| <b>Vacuum</b>                  | ≥ 100 kPa                                                                                                                                                                                                |
| <b>Putere maximă de ieșire</b> | 250 VA                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Interfață</b>               | ecran tactil de 10,4 inch                                                                                                                                                                                |
| <b>Frecvență ultrasunete</b>   | 1 MHz (1 milion de oscilații pe secundă)                                                                                                                                                                 |
| <b>Skin scrubber</b>           | 28.000 de vibrații pe secundă                                                                                                                                                                            |
| <b>Alimentare</b>              | 100 - 240 V c.a., 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                             |
| <b>Mediu de lucru</b>          | 5 °C - 40 °C                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dimensiuni ambalaj</b>      | 55 × 52 × 146 cm                                                                                                                                                                                         |
| <b>Greutate netă</b>           | 45 kg                                                                                                                                                                                                    |



Unitate principală pe stativ, cu toate mânerle

## Pachet Visage Studio

- Garanție 24 luni pentru persoane juridice
- Service propriu în România, 5 ani post-garanție
- Training gratuit și suport tehnic
- Manual în limba română, declarație și certificat de conformitate
- Finanțare în rate și opțiuni de plată pentru firme

## Siguranță și utilizare responsabilă


Aparatul este destinat utilizării profesionale și nu este un dispozitiv medical — nu se utilizează pentru tratarea bolilor. Verificați ca rețeaua electrică să corespundă tensiunii și frecvenței de pe eticheta din spatele aparatului. Așezați aparatul pe o bază stabilă, ferit de lovături și vibrații, de lumina directă a soarelui și de surse de căldură, la temperaturi între 5 și 40 °C. Nu acoperiți ventilatorul din spate. Dermabraziunea nu se aplică pe piele sensibilă, inflamată, lezată sau cu edem.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială disponibilă.


INFORMAȚII SUPLIMENTARE

# Punerea în funcțiune și interfața de lucru


Înainte de prima utilizare verificați toate conexiunile, porniți și opriți aparatul de 3 - 5 ori, apoi lăsați-l să funcționeze 5 minute pentru a verifica stabilitatea.

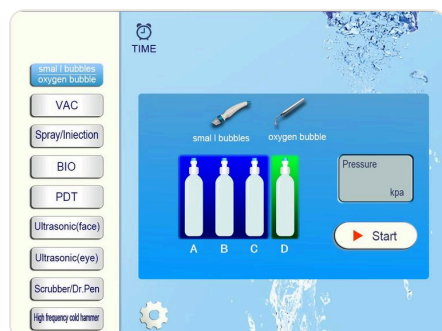

Ecranul principal

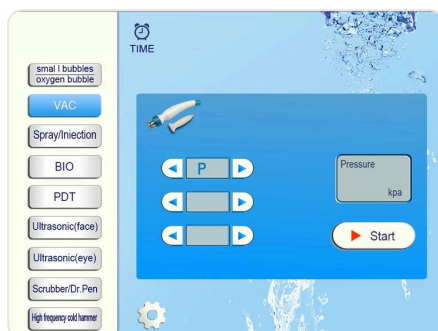

Funcția de pulverizare

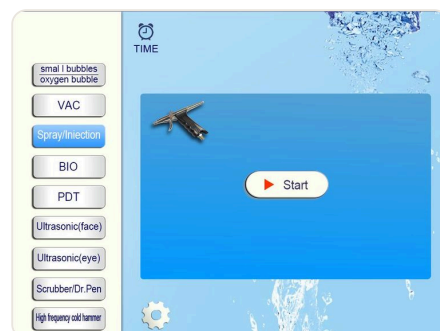

Ultrasunete: față și ochi

## Pași de lucru pe ecran

- Setati durata și alegeți flaconul cu soluția dorită.
- Reglați nivelul apei și vacuumul din butoanele rotative.
- Pentru dermabrazie și pen de vacuum, conectați tubul la filtrul din spatele aparatului, reglați presiunea și apăsați START.
- Pentru pulverizare, alegeți funcția și apăsați START.
- Pentru terapie fonică, reglați energia și modul, alegeți canalul potrivit și apăsați START.
- Pentru ultrasunete alegeți față sau ochi, reglați modul și intensitatea, apoi apăsați START.
- Pentru skin scrubber, apăsați START și reglați energia de pe mâner.

## Pistolul de oxigen — mod de folosire

- Curățați profund pielea înainte de tratament.
- Amestecați 2 - 3 picături de ulei esențial cu apă purificată, până la aproximativ două treimi din pahar, apoi înșurubați bine capacul.
- Apăsați butonul de control pentru eliberarea oxigenului și trageți înapoi pentru pulverizarea ceții fine.
- Pulverizați de sus în jos, de la frunte spre gât, evitând ochii și nasul.
- Ritmul de pulverizare se adaptează după capacitatea de absorbție a clientului.
- Curățați paharul și tubul cu apă purificată după fiecare utilizare.