

VISAGE STUDIO

ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE
PENTRU STANDARDE ÎNALTE

Mesogun mezoterapie cu ace

Pistol de mezoterapie cu dozare constantă și aspirație cu presiune negativă, pentru injectarea controlată a acidului hialuronic și a altor produse de îngrijire, cu ecran OLED color și memorii de lucru.



DOZĂ CONSTANTĂ.
ASPIRAȚIE AUTOMATĂ.

4

tipuri de
pistoane

2000

injecții pe
încărcare

1,5"

ecran OLED
color

2

moduri de
lucru



Scanează
pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/mesogun-mezoterapie-cu-ace-cadou-seruri-faciale-hidratante-dr-kraut

PREZENTARE

Doză exactă, de fiecare dată

Pistolul înlocuiește injectarea manuală cu una controlată electronic: pistonul împinge o cantitate exactă de produs, iar mânerul cu presiune negativă ridică pielea înainte de înțepare. Rezultatul este o distribuție uniformă a produsului, un disconfort mai mic pentru client și o ședință semnificativ mai rapidă.

01

Dozare cantitativă

În modul DOSE se stabilește cantitatea injectată la fiecare acționare, pe șase trepte, iar contorul afișează numărul de injecții efectuate.

02

Viteză constantă

În modul CONT produsul este livrat continuu, cu viteză reglabilă pe cinci trepte, pentru zone întinse.

03

Presiune negativă

Mânerul de vacuum ridică pielea automat înainte de injectare — acupunctura cu vacuum dinamic reduce disconfortul și îmbunătățește distribuția.

Ecran OLED color de 1,5 inch

Unghi larg de vizualizare · afișare clară a configurației · memorii M1 și M2 pentru seturile utilizate frecvent


Ce se afișează pe ecran

- **SHOT** — numărul de injecții efectuate
- **SYRINGE** — tipul seringii montate: 1, 3, 5 sau 10 cc
- **MODE** — modul de lucru: DOSE sau CONT
- **AMOUNT (DOSE)** — cantitatea injectată
- **SPEED** — viteza de injectare, pe 5 trepte
- **AMOUNT (CONT)** — debitul în modul continuu
- Starea bateriei și a încărcării, plus starea aspirației

Reglaje pe tip de seringă

- **1 cc** — de la 50 μ l la 500 μ l, cu pas de 10 μ l
- **3 cc** — de la 35 μ l la 500 μ l, cu pas de 50 μ l
- **5 cc** — de la 50 μ l la 1000 μ l, cu pas de 50 μ l
- **10 cc** — de la 50 μ l la 1000 μ l, cu pas de 50 μ l

Memoriile M1 și M2 salvează două seturi complete de parametri, apelabile printr-o apăsare scurtă.

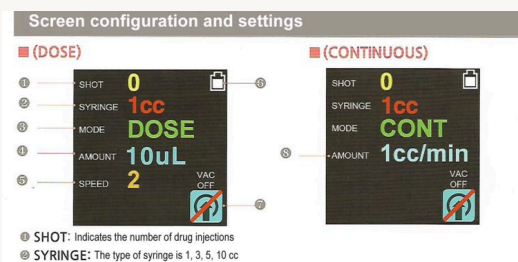

Cele două moduri de lucru: DOSE, cu doză prestabilită, și CONT, cu debit continuu

■ UTILIZARE

Montarea seringii și a mânerului de vacuum

1

Pregătirea seringii

Rotiți pistonul în sens antiorar până se eliberează suportul. Trageți pistonul fără a-l scoate complet și nu îndepărtați capacul de cauciuc.

2

Montarea pistonului

Alegeți pistonul de injectare potrivit seringii folosite și înșurubați-l pe aparat, cu alimentarea oprită.

3

Capul de fixare

Așezați capul de fixare a seringii pe unitatea principală și rotiți-l în sens orar până se blochează.

4

Acul și pornirea

Montați acul și îndepărtați capacul de cauciuc al seringii. Apăsăți butonul de pornire pentru a porni aparatul.

5

Filtrul

Împingeți filtrul în locașul de pe mânerul de vacuum. Fără filtru montat corect, sistemul poate prezenta scurgeri.

6

Mânerul de vacuum

Împingeți partea din spate a unității principale în mânerul de presiune negativă, dinspre față.

7

Acul și furtunul


Montați acul cu presiune negativă pe seringă și conectați-l la furtunul mânerului.

8

Aspirația

Cu mânerul montat, aspirația se declanșează automat în modul DOSE. În modul CONT aspirația nu se activează.

Product Precautions

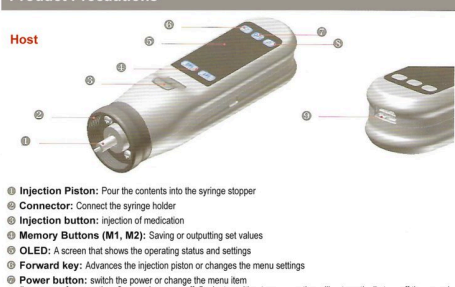

Componentele aparatului și denumirea butoanelor

Dedicated charger and charging base connection

- Insert the charger into the charging stand of 100 ~ 240V AC, connect the plug with the charging jack on the back of the charging stand
- Host and installed in the host of the negative pressure handle plug in the charging base can be charged



Baza de încărcare și conectarea alimentatorului

FURTUNUL DE ASPIRAȚIE

Folosiți exclusiv furtunul de silicon cu diametru interior de 3 mm și diametru exterior de 5 mm. Alte dimensiuni reduc puterea de aspirație.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Funcție principală	Injectare cantitativă și constantă de acid hialuronic și alte produse
Alimentare	acumulator litiu-polimer integrat, 7,4 V / 850 mAh
Încărcător	ieșire 8,4 V c.c. / 500 mA max · intrare AC 100 - 240 V (50 / 60 Hz)
Autonomie	până la 2000 de injecții cu presiune negativă, la o încărcare completă
Consum	până la 4 W
Ecran	OLED color de 1,5 inch
Moduri de lucru	continuu (CONT) și cantitativ (DOSE)
Trepte de injectare	5 trepte în modul cu viteză fixă
Oprire automată	după 5 minute fără nicio operație
Greutate	220 g unitatea principală (cu capul de fixare) · 100 g mânerul de vacuum
Dimensiuni	unitate principală 152 × 38 × 38 mm · mâner de vacuum 170 × 70 × 48 mm



Unitatea principală, fără mânerul de vacuum

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 luni pentru persoane juridice
- Service propriu în România, 5 ani post-garanție
- Training gratuit și suport tehnic
- Manual în limba română, declarație și certificat de conformitate
- Finanțare în rate și opțiuni de plată pentru firme

Conținutul pachetului

- Mâner cu presiune negativă
- 2 tipuri de pistoane de injectare: 1 cc (montat) și 3, 5, 10 cc
- Bază de încărcare și încărcător dedicat
- 2 capuri de fixare a seringii: 1 - 3 cc și 5 - 10 cc
- Cap de conversie pentru încărcare
- 2 furtunuri de presiune negativă (3 × 5 mm) și 1 filtru
- 1 ac cu presiune negativă multi-pin, ambalat steril
- 1 seringă de 5 ml

Siguranță și utilizare responsabilă

Se folosesc exclusiv ace de unică folosință, ambalate steril; verificați integritatea ambalajului înainte de utilizare. Nu folosiți și nu depozitați aparatul în apropierea materialelor inflamabile sau explozive. Nu atingeți aparatul cu mâinile ude. Curățați aparatul și componentele cu o lavetă uscată înainte și după fiecare utilizare. Nu spălați cu apă. Aparatul nu stabilește diagnostice medicale.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială disponibilă.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE


Încărcare, curățare și precauții

Încărcare

- Introduceți alimentatorul de 100 - 240 V c.a. în mufa de pe spatele bazei de încărcare.
- Unitatea principală și mânerul de presiune negativă se încarcă împreună, așezate în bază.
- Durata de viață a acumulatorului este de aproximativ 500 de cicluri complete de descărcare.
- Nu lăsați aparatul descărcat timp îndelungat — durata de viață a acumulatorului scade.
- La prima utilizare, încărcați complet aparatul.
- O încărcare completă durează aproximativ 2 ore, în funcție de nivelul rămas.
- Când nu îl folosiți, țineți aparatul în bază: este mai bine pentru acumulator.

Curățare și dezinfecție

- După utilizare, ștergeți capul de fixare a seringii cu alcool sau cu vată îmbibată în alcool.
- Celelalte componente se curăță cu o lavetă moale și uscată, ștergând ușor suprafața.
- Nu introduceți aparatul în apă.
- După utilizare, opriți pistonul complet retras; dacă rămâne avansat, se poate deteriora.
- Verificați după fiecare utilizare dacă au rămas resturi de produs sau corpuri străine.

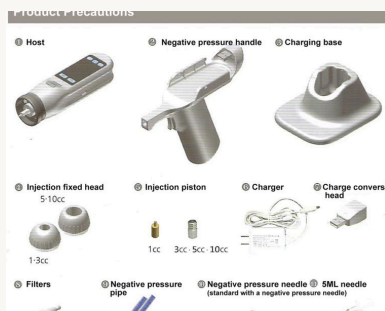

Componentele livrate în pachet

Precauții importante

- Medicamentele sau corpurile străine se pot lipi de corpul pistonului și pot împiedica împingerea corectă a produsului.
- Nu conectați aparatul la un încărcător nededicat sau la alt adaptor.
- Nu conectați cablul USB al unui computer sau al altui dispozitiv electronic la portul de încărcare de pe spatele unității principale — se poate conecta exclusiv un încărcător dedicat.
- La trecerea dintr-un mediu rece într-unul cald, se poate forma condens; așteptați ca picăturile să dispară înainte de utilizare.