


VISAGE STUDIO

ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE
PENTRU STANDARDE ÎNALTE

NeuroSculpt Pro unde de șoc și radiofrecvență 448K

Trei tehnologii într-un singur aparat: terapie cu unde de șoc, radiofrecvență 448K în modurile CET și RET și tehnologia JMD de eliberare miofascială — pentru recuperare, remodelare corporală și rejuvenare a pielii, fără bisturiu.

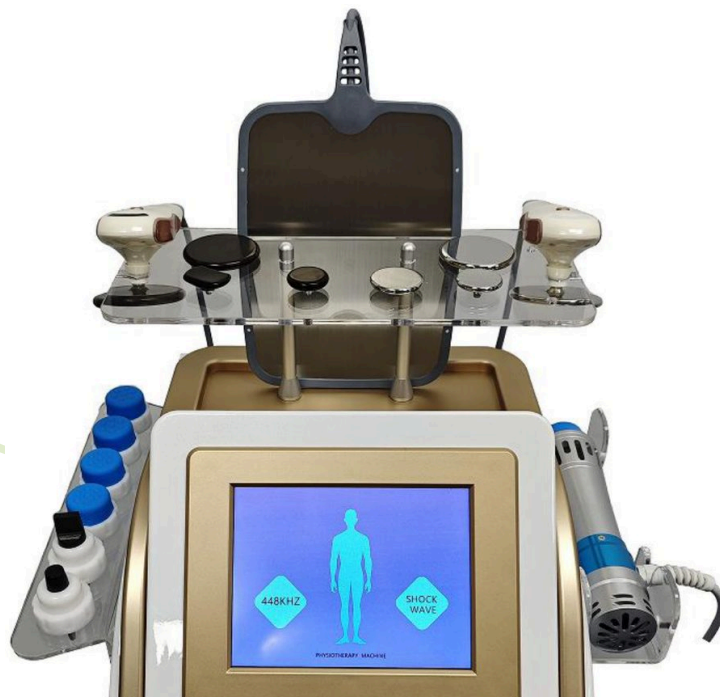

**TREI TEHNOLOGII.
UN SINGUR APARAT.**

448KHz

frecvență
CET/RET

≤600W

putere
totală

1-16Hz

frecvență
unde de șoc

8"

ecran
tactil



Scanează
pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/aparat-tecar-shockwave-radiofrecventa-profesional-neurosculpt-pro

PREZENTARE

Trei tehnologii, un singur protocol

NeuroSculpt Pro reunește terapia cu unde de șoc, radiofrecvența 448K — în modurile CET și RET — și instrumentul JMD de eliberare miofascială. Aparatul acoperă un traseu complet: reducerea durerii, remodelarea corporală, fermitatea pielii și corectarea posturală, fără intervenție chirurgicală și fără timp de recuperare.

01

Unde de șoc

O undă cu creștere rapidă de presiune, urmată de o scădere treptată. Acțiunea asupra zonelor dureroase cronice dizolvă depunerile de calciu și îmbunătățește vascularizația.

02

Radiofrecvență 448K

CET încălzește superficial și stimulează colagenul fără a afecta epiderma. RET pătrunde mai adânc, descompune grăsimea și remodelează conturul corporal.

03

Tehnologia JMD

Instrument din oțel inoxidabil, tăiat cu laser și lustruit manual, cu muchie rotunjită. Eliberează tensiunea din rețeaua fascială și corectează postura.

Domenii de utilizare

Ortopedie · Fizioterapie · Medicină sportivă · Urologie · Recuperare musculo-scheletală · Remodelare corporală

Terapia cu unde de șoc

- Ameliorare rapidă a durerii și restabilirea mobilității, fără nevoia de analgezice
- Terapie non-chirurgicală, potrivită pentru dureri acute sau cronice
- Tratament pentru celulită: tonifiere, fermitate și netezirea pielii
- Poate fi folosită singură sau combinată cu alte tratamente de slăbire și fermitate
- Terapie pentru disfuncția erectilă de origine vasculară — formează vase noi în țesutul penian

Radiofrecvența 448K

- **CET** — temperatură constantă la nivelul epidermei, căldură profundă la radiofrecvență, fără disconfort
- **RET** — energie de înaltă frecvență proiectată profund în derm, pentru descompunerea grăsimii corporale
- Stimulează secreția de colagen nou și reconstruiește eșafodajul pielii
- Efect de fermitate, reducerea ridurilor și restaurarea elasticității

■ APLICAȚII

Ce rezolvă fiecare tehnologie

Unde de șoc — efecte

- Creșterea permeabilității membranei celulare prin activarea canalelor ionice
- Stimularea diviziunii celulare și a producției de citokine
- Regenerarea vaselor din zona tendoanelor și mușchilor, creșterea factorului de creștere beta 1
- Efect chemotactic și mitogenic asupra osteoblastelor — vindecarea și remodelarea osoasă
- Îmbunătățirea macro-circulației și a metabolismului
- Dizolvarea fibroblastelor calcificate și susținerea producției de collagen
- Reducerea tensiunii tisulare și efect analgezic

Radiofrecvență — mod CET

- Lifting și fermitate, albirea și rejuvenarea pielii
- Controlul acneei și ameliorarea ridurilor
- Ardere de grăsime și reducerea durerii
- Ameliorarea constipației și creșterea elasticității
- Fermitatea țesutului postpartum și relaxarea mușchilor dureroși
- Relaxarea articulațiilor rigide
- Susține introducerea serurilor cosmetice

Radiofrecvență — mod RET

- Drenaj limfatic și îmbunătățirea circulației sanguine
- Repararea celulelor, nervilor, oaselor, mușchilor și ligamentelor
- Reglarea secreției endocrine și îmbunătățirea somnului
- Luminozitate a tenului
- Ameliorarea laxității și a problemelor de mărire a sânilor
- Remodelarea conturului corporal și a celulitei pe picioare
- Slăbire și arderea grăsimii viscerale

Tehnologia JMD — indicații


- Mobilitate limitată și dureri în timpul mișcării
- Epicondilită medială și laterală, sindromul de tunel carpian
- Dureri de gât, umăr, talie și picioare
- Fasciită plantară, dureri de călcâi, bursită, tendinită
- Corectarea posturii generale prin echilibrarea tensiunii din rețeaua fascială
- Tehnologie folosită și pentru corectarea scoliozei

JMD arată ca un cuțit, dar nu este unul: are muchie rotunjită, fiecare instrument având un unghi, o grosime și o greutate specifice.

■ UTILIZARE

Interfața de lucru și zonele de tratament


Aparatul pornește direct în interfața de lucru, cu selectarea modului — unde de șoc sau 448K — apoi a zonei de tratament dintr-un set predefinit de 10 zone ale corpului.

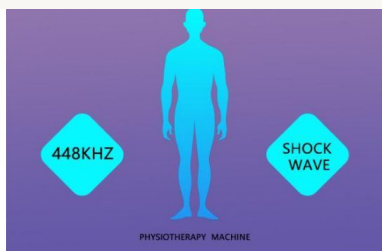

Ecranul de pornire: selectarea modului 448KHz sau Shock Wave



Modul 448K: RES (rezistiv), CAP (capacitiv) și JMD

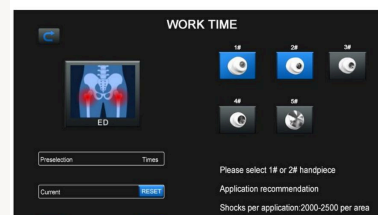

Ecranul de lucru pentru unde de șoc, cu selectarea zonei și a manerului

Pași de utilizare

- Verificați cablul de alimentare și conectarea corectă a mânerului la aparat.
- Porniți întrerupătorul de pe panoul din spate — apare automat meniul de lucru.
- Selectați zona de tratat dintre cele 10 zone predefinite ale sistemului.
- Alegeți mânerul potrivit: țineți capul de lucru într-o mână și deșurubați mânerul vechi în sens antiorar, apoi înșurubați-l pe cel nou în sens orar.
- Reglați frecvența și energia din interfața ecranului tactil.

Durata recomandată pe zonă

- Pungi sub ochi, bărbie dublă — 20 minute
- Brațe lăsate, gât și decolteu, protocol facial anti-îmbătrânire — 30 minute
- Lifting bust, protocol abdominal, fese, zona țăoldurilor — 30 minute
- Protocoale pentru celulită pe partea inferioară a corpului — 50 minute
- Mâini și picioare — 30 minute · protocoale specifice — 90 minute

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Tehnologii	Terapie cu unde de șoc · Radiofrecvență 448K (CET și RET) · Tehnologia JMD
Ecran	ecran tactil de 8 inch
Putere totală	≤ 600 W
Putere CET (radiofrecvență superficială)	≤ 100 W
Putere RET (radiofrecvență profundă)	≤ 180 W
Frecvență CET / RET	448 KHz
Putere unde de șoc	≤ 180 W
Frecvență unde de șoc	1 Hz - 16 Hz
Zone de tratament predefinite	10 zone, selectabile din ecranul de lucru
Greutate netă / brută	10 kg / 15 kg
Dimensiuni ambalaj	55 × 35 × 48 cm



Unitate principală cu manerele și electrozii montați

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 luni pentru persoane juridice
- Service propriu în România, 5 ani post-garanție
- Training gratuit și suport tehnic
- Manual în limba română, declarație și certificat de conformitate
- Finanțare în rate și opțiuni de plată pentru firme

Contraindicații — unde de șoc

- Ochii și zona din jur, miocardul, măduva spinării, gonadele, rinichii și ficatul
- Afecțiuni de coagulare a sângelui sau tratament anticoagulant
- Tromboză, tumori, polineuropatie, cartilaj de creștere la copii
- Boli cardiace, hipertensiune, sarcină, dispozitive medicale implantate
- Zone cu inflamație acută, tromboflebită, tulburări hemoragice

Contraindicații — 448K

- Stimulator cardiac sau alte implanturi electronice
- Sarcină
- Piele neintactă — răni deschise sau arsuri
- Tromboflebită

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială disponibilă.