


VISAGE STUDIO
ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

DERMASYNC Analizator Facial

Detectare Inteligentă a Pielii la Nivel Medical

Analizator facial profesional cu inteligență artificială și imagistică spectrală multifuncțională, pentru diagnoze digitale precise ale pielii și rapoarte personalizate — pentru clinici, centre de estetică și laboratoare.

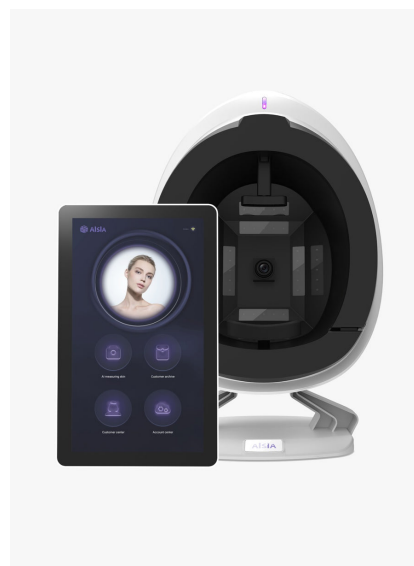

ANALIZĂ. DIAGNOZĂ AI. RAPOARTE.

ZOOM 50X, COLECTARE LA 180°.

50x

zoom
optic

19+


indicatori
analizați

180°

colectare
facială

400K+

imagini
de referință

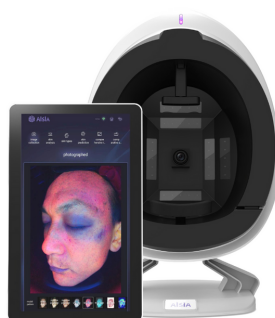

Scanează pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/analizator-facial-dermasync-detectare-inteligenta-a-pielii-la-nivel-medical

PREZENTARE

Hardware inteligent de nivel industrial

DERMASYNC folosește o cameră industrială importată din SUA, cu imagini ultra-precise și zoom de 50x, tehnologie patentată de imagistică spectrală și dezinfectie automată cu lumină albastră. Fața este captată la 180° — frontal și din profil stânga/dreapta — pentru o evaluare completă.

1 Diagnoză AI Analiză automată a peste 19 indicatori cuantificabili: riduri, pigmentări, sebum și inflamație.	2 Rapoarte Raport complet, editabil, printabil și disponibil online pentru fiecare client.	3 Big Data Integrare cu platforme SaaS clinice, API deschis și conectivitate multi-terminal.
--	---	---

Evoluția pielii, înainte și după

Aparatul urmărește evoluția pielii în timp și compară rezultatele înainte și după tratamente, pe straturi ale pielii.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași



1 Pregătire Pielea se curăță de machiaj; clientul se așază în aparat.	2 Captare Se fac imaginile frontal și din profil, la 180°.	3 Analiză AI evaluează indicatorii în toate spectrele de lumină.	4 Raport Se generează raportul, cu recomandări de îngrijire.
--	---	---	---

Algoritmii sunt optimizați pentru toate tipurile de ten — piele albă, galbenă și neagră —, iar interfața poate fi comutată în mai multe limbi.

SPECTRE DE ANALIZĂ

Spectre multiple pentru o imagine completă

Lumină și polarizare	UV și fluorescență	Analize AI
• RGB White Light - vizualizare generală • Polarizare paralelă - texturi, riduri • Polarizare încrucișată - pete, vase	• UV & Blue Light 405 / 365 nm • Acnee, porfirine, pigment profund • Lumină Wood's - leziuni latente	• Spectru compus - inflamații, sensibilitate • Hartă termodinamică • Predicții îmbătrânire și hidratare

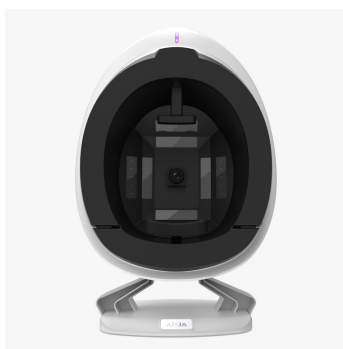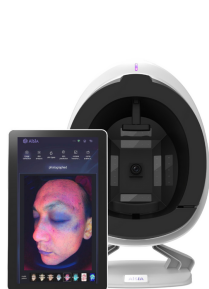


Funcții unice: testarea eficienței produselor dermato-cosmetice și a protecției solare, clasificarea tipurilor de piele și a afecțiunilor comune (acnee, rozacee, hiperpigmentare, vitiligo). Recomandat pentru clinici dermatologice și estetice, spa-uri medicale, centre de testare cosmetică și educație profesională.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Denumire produs	Analizator facial DERMASYNC
Camera	Industrială, importată din SUA
Zoom optic	50x
Colectare facială	180° (față, profil stânga/dreapta)
Spectre	RGB, polarizare paralelă și încrucișată, UV, Wood's, spectru compus AI, hartă termodinamică
Lumină UV & Blue Light	405 nm / 365 nm
Indicatori analizați	Peste 19, cuantificabili
Dezinfecție	Automată, cu lumină albastră
Rapoarte	Editabile, printabile, disponibile online
Conectivitate	API deschis, multi-terminal, integrare SaaS
Bază de date	400.000+ imagini de piele etichetate
Interfață	Multilingvă

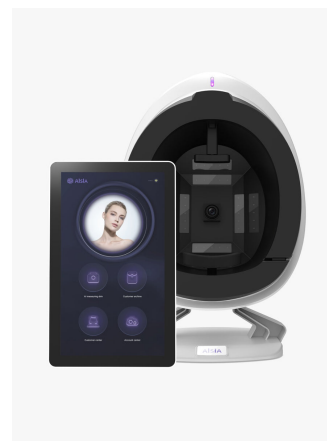

Analizator facial DERMASYNC

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni pentru persoane juridice
- Service și piese de schimb 5 ani post-garanție
- Manual tehnic în limba română
- Declarație și certificat de conformitate

Siguranță și utilizare responsabilă

Dispozitiv de analiză destinat utilizării profesionale. Raportul are rol de evaluare estetică și nu înlocuiește consultul medical de specialitate.

Datele și imaginile clienților se gestionează cu acordul acestora, conform reglementărilor privind protecția datelor personale.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, recomandările după procedură, întreținerea echipamentului și conținutul pachetului, conform manualului de utilizare.

Înainte de analiză

- Pielea se curăță de machiaj și cremă.
- Părul se prinde, fața rămâne descoperită.
- Clientul își sprijină bărbia în suport.
- Ochii rămân închiși în timpul captării.

După analiză

- Raportul se discută cu clientul.
- Se stabilește planul de tratament.
- Imaginile se salvează în fișa clientului.
- Analiza se repetă pentru comparație.

Întreținere

- Lentila camerei se curăță cu lavetă moale.
- Zona de sprijin se dezinfectează după client.
- Aparatul se păstrează uscat, fără praf.
- Software-ul se actualizează periodic.

Utilizare

- Captarea se face în condiții constante de lumină.
- Aceleași setări la analizele repetate.
- Indicatorii se urmăresc în timp.
- Rapoartele se pot printa sau trimite online.

Funcții și interfață

Interfață multilingvă, rapoarte editabile, comparație înainte/după și conectare la platforme SaaS prin API deschis.

IMPORTANT

DERMASYNC este un dispozitiv de analiză estetică: rezultatele orientează tratamentele de salon, dar nu reprezintă un diagnostic medical. Pentru leziuni suspecte, clientul se îndrumă către medicul dermatolog.