

VISAGE STUDIO

ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE
PENTRU STANDARDE ÎNALTE

Magic Roller anticelulitic, tonifiere și drenaj

Terapie prin compresie și micro-vibrație, cu role de bile de silicon rotative la 360°, pentru celulită, drenaj limfatic, tonifiere musculară și remodelarea conturului corporal și facial.



COMPRESIE. MICRO-VIBRAȚIE.
DRENAJ ȘI REMODELARE.

360°

rotație
a rolei

450rpm

măner
corp

410rpm

măner
față

10,4"

ecran
tactil



Scanează
pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/aparat-profesional-anticelulitic-tonifiere-si-drenaj-magic-roller

■ PREZENTARE

Compresie și micro-vibrație, în locul aspirației

Magic Roller înlocuiește masajul clasic prin aspirație și tracțiune cu o terapie mecanică de compresie și micro-vibrație. Rola cilindrică se rotește la 360°, iar bilele de silikon dispuse în fagure transmit țesutului o presiune pulsatilă continuă, fără să strângă și fără să lezeze pielea.

01

Compresie pulsatilă

Bilele apasă și eliberează ritmic țesutul, într-o mișcare continuă de împingere și frământare.

02

Micro-vibrație

Vibrația fină înlocuiește tracțiunea: celulele sunt întinse natural, iar activitatea lor este stimulată în profunzime.


03

Rotație 360°


Rola se rotește în ambele sensuri, cu schimbarea direcției dintr-o singură apăsare, pentru a urmări traseul limfatic.

Cinci acțiuni într-o singură ședință


Musculară · Sedativă · Drenaj limfatic · Vasculară · Remodelare a conturului

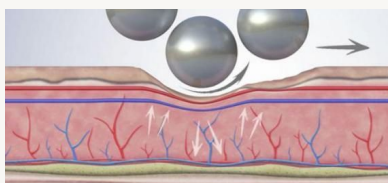

Compresia pulsatilă asupra țesutului

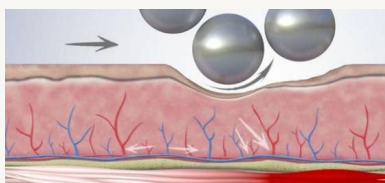

Stimularea circulației și a oxigenării

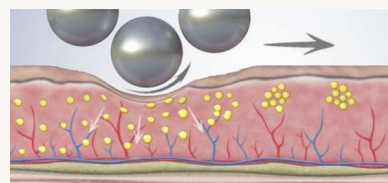

Destinderea depozitelor adipoase

Ce se întâmplă în țesut

Presiunea aplicată ritmic întinde celulele și stimulează activitatea celulară, fluxul sanguin și oxigenarea. Depozitele adipoase sunt presate și destinse, iar grupele musculare profunde sunt relaxate și întinse — se reduce rigiditatea musculară, se accelerează metabolismul și se elimină staza și acumulările de lichid. La nivelul feței, stimularea fibroblastelor susține producția de collagen și elastină.

■ APLICAȚII

Două mânere, corp și față

Mâner mare · corp

- Rolă cu **50 de bile de silicon** dispuse în fagure
- Viteză de rotație 450 rpm
- Coapse, fese, brațe, abdomen, talie, spate, picioare
- Drenaj limfatic, descompunerea depozitelor adipoase, reducerea aspectului de celulită
- Relaxarea grupelor musculare profunde și reducerea rigidității



Mâner corp

Mâner mic · față, gât, umeri

- Rolă cu **60 de bile de silicon**, densitate și diametru specifice
- Viteză de rotație 410 rpm
- Față, gât, decolteu, umeri
- Stimulează producția de colagen și elastină, crește aportul de oxigen
- Reduce edemul și ridurile de expresie, tonifică și relaxează musculatura



Mâner față, gât și umeri

Zone de tratament



Cele mai solicitate zone: coapse, fese și brațe

Ritmul ședințelor

- Durata unei ședințe: de la aproximativ 45 de minute până la 1 oră și 30 de minute, în funcție de suprafața tratată
- Frecvență recomandată: de 2-3 ori pe săptămână
- Interval minim între ședințe: 48 de ore
- Intensitatea crește progresiv, până la nivelul de toleranță al clientului

CONFORTUL CLIENTULUI

Terapia prin compresie și micro-vibrație este neinvazivă și nedureroasă. Senzația este similară unui masaj de țesut profund. Clientul își poate relua activitatea normală imediat după ședință.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Tehnologie	Compresie și micro-vibrație prin role cu bile de silicon
Rotația rolei	360°, sens direct și invers, comutare dintr-o apăsare
Mâner mare (corp)	rolă cu 50 de bile de silicon · 450 rpm
Mâner mic (față, gât)	rolă cu 60 de bile de silicon · 410 rpm
Frecvență de ieșire	40 - 254 Hz
Putere de ieșire	10 - 300 W
Trepte de viteză	9 trepte reglabile
Temporizare	până la 90 de minute, în trepte de 10 minute
Memorii de lucru	5 seturi de parametri (M1 - M5)
Ecran	ecran tactil LCD de 10,4 inch
Afișaj pe mâner	ecran LED pentru timp și viteză, plus bară luminoasă LED
Alimentare	AC 110 V / 220 V
Siguranță fuzibilă	5 A
Dimensiuni ambalaj	56 × 44 × 118,5 cm
Greutate	cca. 17,6 kg ambalaj · 41 kg total



Pachet Visage Studio

- Garanție 24 luni pentru persoane juridice
- Service propriu în România, 5 ani post-garanție
- Training gratuit și suport tehnic
- Manual în limba română, declarație și certificat de conformitate
- Finanțare în rate și opțiuni de plată pentru firme

Siguranță și utilizare responsabilă

Aparatul este destinat utilizării profesionale, de către personal instruit. Tratamentul este neinvaziv și nu produce durere, roșeață sau urme pe piele. Rola se deplasează continuu pe suprafața tratată, fără a fi menținută pe loc. Aparatul nu stabilește diagnostice medicale și nu înlocuiește consultația sau tratamentul medical.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială disponibilă.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Instalare, interfață și întreținere

Informații practice pentru punerea în funcțiune a aparatului, utilizarea interfeței de lucru și întreținerea rolor.

Instalare și pornire

- Aliniați mânerul cu soclul de pe spatele aparatului și așezați-l pe suport.
- Introduceți cablul de alimentare în priza de pe spatele aparatului.
- Porniți întrerupătorul general, apoi apăsați butonul de pornire.
- După ecranul de pornire, aparatul intră automat în interfața de lucru.

Interfața de lucru

- Selectarea mânerului: corp sau față.
- Sensul de rotație: orar sau antiorar, comutare dintr-o apăsare pe mâner.
- Timp de lucru: până la 90 de minute, în 9 trepte a câte 10 minute.
- Viteză: 9 trepte, reglabile din butoanele + și -.
- Memorii M1 - M5: salvarea și apelarea a 5 seturi de parametri.
- Butoane de pornire, pauză și revenire.



Interfața profesională de lucru

Întreținerea rolor

- Apăsați simultan butoanele laterale și scoateți capacul mânerului.
- Extrageți corpul rolei cu bile de silicon, trăgând drept în afară.
- Montați rola nouă.
- Aliniați axul și fixați capacul în canal.

Bilele de silicon sunt flexibile și netede; rularea este blândă, fără înțepături, cu împingere și masaj uniform.



Rolele detașabile ale mânerelor



Dispunerea în fagure a bilelor de silicon