**VISAGE STUDIO**
**ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE**

# TecaSculpt 10

## Aparat de Remodelare Corporală 10 în 1 cu Tecar 448 kHz CET/RET, Radiofrecvență cu Vacuum, EMS și Termoterapie

Echipament profesional pentru remodelare corporală, drenaj și tonifiere: terapie Tecar capacitivă și rezistivă cu câte 4 electrozi, două capete RF cu vacuum, cap BIO Heat, spatulă și bară de fascie EMS, două capete Warm & EMS și pernă cu încălzire și EMS — toate controlate dintr-un ecran tactil.



**CĂLDURĂ PROFUNDĂ. DRENAJ. TONIFIERE.**
**10 ACCESORII ÎNTR-UN SINGUR APARAT.**

| 10 | 448k | 8 | 1–30 |
|---|---|---|---|
| accesorii într-un singur aparat | Tecar 448 kHz CET / RET | electrozi Tecar interschimbabili | niveluri de intensitate |



TecaSculpt 10 — unitatea principală cu perna EMS & Heat

Fișă de prezentare și parametri tehnici

**DESCOPERĂ PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO**

PREZENTARE

# Remodelare corporală cu căldură profundă și EMS

TecaSculpt 10 este gândit pentru saloanele care oferă tratamente de remodelare corporală, drenaj și tonifiere. Energia Tecar la 448 kHz produce căldură în interiorul țesutului, activează circulația sanguină și limfatică și ajută la refacerea elasticității pielii. Funcțiile se pot folosi separat sau combinate în același protocol.

1
### Tecar CET / RET
Căldură profundă la 448 kHz: CET pentru straturile superficiale și medii, RET pentru țesuturile dense și profunde.

2
### RF cu vacuum
Radiofrecvență cu aspirare stabilă și compresie mecanică, pe un cap mic și unul mare.

3
### EMS
Microcurenți prin bara de fascie, spatula Micro Lift, capetele Warm & EMS și pernă.

4
### Termoterapie
Căldură constantă cu Warm & EMS și perna EMS & Heat; lumină roșie cu BIO Heat.

### 8 electrozi Tecar interschimbabili

4 electrozi CET ceramici și 4 electrozi RET metalici: mare și mic pentru corp, mare și mic pentru față. Conform producătorului, CET acționează la 3–5 cm, iar RET la 9–12 cm adâncime. Senzor de temperatură integrat, cu control dublu al căldurii.

FLUX DE LUCRU

# Utilizare simplă în 4 pași

1
### Pregătește clientul
Fără obiecte metalice; produs conductor și placa neutră poziționată.

2
### Alege accesoriul
Electrodul potrivit zonei: mare pentru corp, mic pentru față și zone restrânse.

3
### Setează parametrii
Timp, intensitate (1–30), temperatură și mod EMS din ecranul tactil.

4
### Lucrează în mișcare
Start / Pauză din ecran; electrodul nu stă pe loc, intensitatea crește treptat.



Electrozi CET (sus) și RET (jos) – corp mare, corp mic, față mare, față mic



ACCESORII

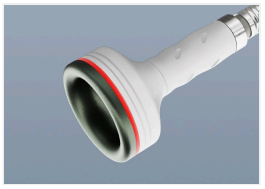
# 10 accesorii de lucru și placă neutră

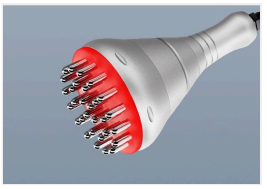
| Tecar 448 kHz | Radiofrecvență și lumină | EMS și căldură |
|---|---|---|
| • CET capacitiv – 4 electrozi ceramici<br>• RET rezistiv – 4 electrozi metalici<br>• Placă neutră din inox | • RF cu vacuum – cap mic<br>• RF cu vacuum – cap mare<br>• Cap BIO Heat – lumină roșie și ioni negativi | • EMS Micro Lift – spatulă de fascie<br>• Bară de fascie EMS<br>• Warm & EMS ×2<br>• Pernă EMS & Heat cu pară de aer |

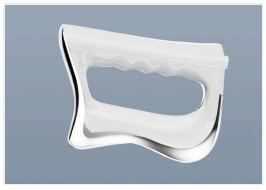

Tecar CET

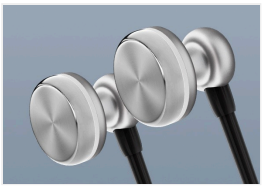

Tecar RET

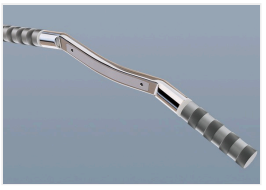

RF vacuum – mic


RF vacuum – mare


BIO Heat


EMS Micro Lift


Warm & EMS ×2


Bară de fascie EMS


Pernă EMS & Heat


Placă neutră

Capetele stau în suporturi transparente pe ambele laturi ale aparatului, iar bara de fascie are suport deasupra carcasei. Cele două capete Warm & EMS se folosesc întotdeauna împreună. Placa neutră închide circuitul pentru Tecar și pentru capetele EMS.

ZONE DE TRATAMENT

# De la coapse și abdomen până la față

**COAPSE, FESE ȘI ABDOMEN**
Căldură profundă Tecar și drenaj cu RF cu vacuum spre zona inghinală; aspectul de celulită și conturul corporal.

**TALIE ȘI SPATE**
Warm & EMS, bara de fascie EMS și perna EMS & Heat, pentru tonifiere, drenaj și relaxare.

**BRAȚE ȘI UMERI**
Drenaj spre axilă cu capetele RF și bara EMS; relaxarea tensiunii la umeri și ceafă cu BIO Heat.

**FAȚĂ**
Electrozi CET și RET mici și capul RF mic, pentru fermitatea pielii și conturul feței.

FIȘĂ TEHNICĂ

# Parametri tehnici principali

| | |
|---|---|
| Denumire produs | **Aparat de remodelare corporală TecaSculpt 10** |
| Model | **M43** |
| Tehnologii | **Tecar 448 kHz CET/RET, radiofrecvență cu vacuum, EMS (microcurenți), termoterapie, lumină roșie și ioni negativi** |
| Accesorii de lucru | **10 + placă neutră din inox** |
| Electrozi Tecar | **4 CET ceramici + 4 RET metalici** |
| Adâncime de acțiune | **CET 3–5 cm, RET 9–12 cm (producător)** |
| Capete RF cu vacuum | **50 de trepte de temperatură** |
| Pernă EMS & Heat | **69 de electrozi bio-microcurent** |
| Reglaje | **timp, intensitate 1–30, temperatură, mod EMS** |
| Control | **ecran tactil, Start / Pauză** |
| Alimentare | **220–240 V, 50–60 Hz, priză cu împământare** |
| Dimensiuni aparat | **40 × 55 × 41 cm** |
| Greutate aparat | **23,5 kg** |
| Mediu de funcționare | **10–40°C** |
| Durată EMS & Heat | **30–60 minute / ședință** |



Vedere 3/4 – unitatea principală cu capetele de lucru

## Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni
- Service și suport tehnic în România
- Instruire la achiziție
- Consultanță pentru protocoalele de tratament

### Siguranță și utilizare responsabilă

Echipament destinat exclusiv utilizării profesionale în saloane, de către personal instruit. Nu este un dispozitiv medical. Intensitatea pornește de la nivel mic și crește treptat, în funcție de zona tratată și de senzația clientului.

Nu se utilizează în sarcină, la persoane cu stimulator cardiac sau boli de inimă, cu implanturi metalice, epilepsie sau hipertensiune severă. Clientul nu poartă obiecte metalice în timpul tratamentului.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Parametrii de tratament se stabilesc de către operator, conform manualului de utilizare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

# Utilizare corectă și îngrijire

Informații practice pentru pregătirea tratamentului, lucrul cu aparatul, recomandările după procedură și conținutul pachetului.

### Înainte de tratament

- Verificați contraindicațiile și discutați cu clientul obiectivele.
- Clientul își îndepărtează toate obiectele metalice.
- Aplicați produsul conductor uniform pe zona tratată.
- Poziționați placa neutră în contact cu pielea clientului.

### În timpul tratamentului

- Electrodul se ține lipit de piele și se mișcă continuu.
- Intensitatea crește treptat; întrebați permanent clientul cum se simte.
- Înainte de a ridica electrodul, reduceți intensitatea la minimum.
- La prima ședință, maximum 100 de minute de lucru pe zi.

### După tratament

- Clientul evită frigul timp de 4 ore.
- Fără mâncare rece și fără efort intens în următoarele 4 ore.
- Curățați și dezinfectați electrozii și capetele după fiecare client.

### Conținutul pachetului

- Unitate principală TecaSculpt 10 cu ecran tactil
- 10 accesorii de lucru și placă neutră din inox
- 4 electrozi CET și 4 electrozi RET
- Cablu de alimentare, certificat de garanție, declarație de conformitate și manual în limba română

### Interfață

Ecran tactil cu comenzi pentru timp, intensitate, temperatură și modul EMS, butoane Start / Pauză și Revenire. Perna EMS & Heat se strânge din para de aer până la o presiune ușoară.

IMPORTANT

Aparatul nu se utilizează în sarcină, la persoane cu stimulator cardiac, boli de inimă sau aritmii, afecțiuni oncologice, intervenții chirurgicale majore recente, diabet, epilepsie sau hipertensiune severă, la persoane cu implanturi metalice sau fire de aur în față, pe pielea alergică sau cu leziuni, ori la mai puțin de 3 luni după intervenții chirurgicale faciale. Aparatul se conectează doar la o priză cu împământare, fără prelungitoare multiple, și se amplasează pe o suprafață stabilă, cu minimum 5 cm spațiu liber în jur.